

Informação de compra

0.018"	50cm				90cm				150cm			
Diâmetro	20mm	30mm	40mm	60mm	20mm	30mm	40mm	60mm	20mm	30mm	40mm	60mm
3.0mm	2I-18S32	2I-18S33	2I-18S34	2I-18S36	2I-18L32	2I-18L33	2I-18L34	2I-18L36	2I-18X32	2I-18X33	2I-18X34	2I-18X36
4.0mm	2I-18S42	2I-18S43	2I-18S44	2I-18S46	2I-18L42	2I-18L43	2I-18L44	2I-18L46	2I-18X42	2I-18X43	2I-18X44	2I-18X46
5.0mm	2I-18S52	2I-18S53	2I-18S54	2I-18S56	2I-18L52	2I-18L53	2I-18L54	2I-18L56	2I-18X52	2I-18X53	2I-18X54	2I-18X56
6.0mm	2I-18S62	2I-18S63	2I-18S64	2I-18S66	2I-18L62	2I-18L63	2I-18L64	2I-18L66	2I-18X62	2I-18X63	2I-18X64	2I-18X66
7.0mm	2I-18S72	2I-18S73	2I-18S74	2I-18S76	2I-18L72	2I-18L73	2I-18L74	2I-18L76	2I-18X72	2I-18X73	2I-18X74	2I-18X76
8.0mm	2I-18S82	2I-18S83	2I-18S84	2I-18S86	2I-18L82	2I-18L83	2I-18L84	2I-18L86	2I-18X82	2I-18X83	2I-18X84	2I-18X86

0.035"	50cm				75cm			
Diâmetro	20mm	30mm	40mm	60mm	20mm	30mm	40mm	60mm
3.0mm	2I-35S32	2I-35S33	2I-35S34	2I-35S36	2I-35L32	2I-35L33	2I-35L34	2I-35L36
4.0mm	2I-35S42	2I-35S43	2I-35S44	2I-35S46	2I-35L42	2I-35L43	2I-35L44	2I-35L46
5.0mm	2I-35S52	2I-35S53	2I-35S54	2I-35S56	2I-35L52	2I-35L53	2I-35L54	2I-35L56
6.0mm	2I-35S62	2I-35S63	2I-35S64	2I-35S66	2I-35L62	2I-35L63	2I-35L64	2I-35L66
7.0mm	2I-35S72	2I-35S73	2I-35S74	2I-35S76	2I-35L72	2I-35L73	2I-35L74	2I-35L76
8.0mm	2I-35S82	2I-35S83	2I-35S84	2I-35S86	2I-35L82	2I-35L83	2I-35L84	2I-35L86

0.035"	90cm				150cm			
Diâmetro	20mm	30mm	40mm	60mm	20mm	30mm	40mm	60mm
3.0mm	2I-35E32	2I-35E33	2I-35E34	2I-35E36	2I-35X32	2I-35X33	2I-35X34	2I-35X36
4.0mm	2I-35E42	2I-35E43	2I-35E44	2I-35E46	2I-35X42	2I-35X43	2I-35X44	2I-35X46
5.0mm	2I-35E52	2I-35E53	2I-35E54	2I-35E56	2I-35X52	2I-35X53	2I-35X54	2I-35X56
6.0mm	2I-35E62	2I-35E63	2I-35E64	2I-35E66	2I-35X62	2I-35X63	2I-35X64	2I-35X66
7.0mm	2I-35E72	2I-35E73	2I-35E74	2I-35E76	2I-35X72	2I-35X73	2I-35X74	2I-35X76
8.0mm	2I-35E82	2I-35E83	2I-35E84	2I-35E86	2I-35X82	2I-35X83	2I-35X84	2I-35X86

Bainha Compatível

5F

6F

7F



Brosmed Medical Co., Ltd
15th Building, SMEs Venture Park SongShan
Lake Hi-Tech Industrial Development
Zone Dongguan 523808, Guangdong, China
Tel: +86-769-2289 2018
Fax: +86-769-2289 2016
E-mail: sales@brosmed.com



Distribuidor:

Rua Brasília Cuman, 566
São Braz – CEP 82315-010
Curitiba – PR
Fone/Fax: + 55 (41) 3233-7887
www.tecmedic.com.br


RMS: 80202919009



Tri-Wedge

Cateter balão de dilatação

Ideal no tratamento da Estenose de Fístula AV

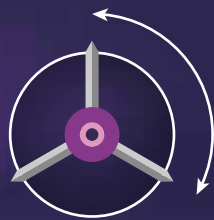

Elementos de scoring a cada 120°

Três fios metálicos triangulares posicionados em 360° para uma dilatação precisa e eficiente

Tri-Wedge

Cateter balão de dilatação

Excelente "Trackability"

O fio de "scoring" oferece uma impressionante capacidade de "pushability" e "trackability" para acessar facilmente as lesões, mesmo em anatomias tortuosas.




Segurança Previsível

Os elementos de "scoring" triangulares reduzem a lesão da parede do vaso e a incidência de reestenose na dilatação com baixa pressão e alta segurança.



Cruzamento Eficiente


O sistema de três fios metálicos triangulares distribuídos axialmente facilita o cruzamento das lesões sem retificar o vaso.

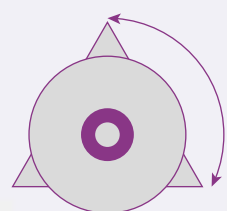

Elementos de "Scoring" a cada 120°


O Cateter Balão de Dilatação para ATP Tri-Wedge é indicado para dilatar estenoses nas artérias periféricas e para o tratamento de lesões obstrutivas das fístulas de diálise arteriovenosa nativas ou sintéticas.

Ele oferece 360° de dilatação precisa e eficaz com o sistema exclusivo de elementos de "scoring" triangulares que criam um padrão de estresse focal facilitando a modificação da placa estenótica com baixa pressão de dilatação.

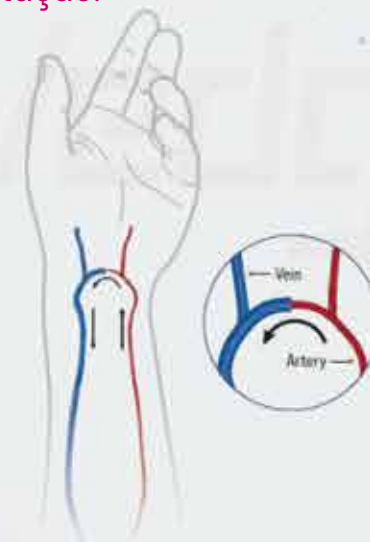

Dilatação Focada Eficaz

O sistema de três fios metálicos triangulares fornece maior concentração de dilatação na placa fibrótica e na placa calcificada, que podem ser facilmente fraturadas com uma pressão de dilatação 38% menor quando comparada às pressões de dilatação dos balões convencionais.

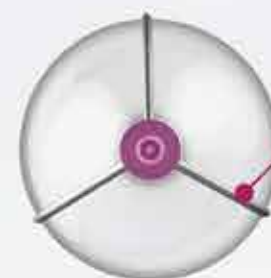

Plataforma única de "scoring"